

Перевага використання зубної щітки

Звичайна зубна щітка

Низька ефективність чищення зубів, максимальна частота рухів зубної щітки становить 100-200 разів, що не дозволяє ретельно видалити зубний наліт і залишки їжі у важкодоступних місцях порожнини рота. Є ймовірність пошкодження ясен.

Обертальна електрична зубна щітка

Головка обертальної електричної зубної щітки відносно велика, що викликає певне почуття дискомфорту. Ви можете добре почистити зовнішню поверхню зубів з усіх боків, проте, навряд чи вам вдасться ефективно видалити всі залишки їжі, які залишилися у маленьких міжзубних проміжках. Не рекомендується використовувати даний вид зубних щіток для дуже чутливих зубів, схильних до стирання.


Звукова електрична зубна щітка Soocare x3

Максимальна частота рухів зубної щітки становить 372000 раз / хвилину. У результаті утворення потужних звукових вібрацій зубна щітка не тільки ефективно видаляє зубний наліт з зовнішньої поверхні зубів, але також не залишає жодних шансів дрібним залишкам їжі, які знаходяться у важкодоступних місцях порожнини рота. У порівнянні зі звичайною зубною щіткою, після використання електричної зубної щітки Soocare x3, ясна залишаються неушкодженими, чистими і здоровими.

Потужні звукові вібрації

Максимальна частота рухів зубної щітки становить 372000 раз / хвилину.

Завдяки високочастотним звуковим вібраціям і 5.5мм щетині зубної щітки створюється супер-потужний енергія, яка ефективно очищає ротову порожнину. В результаті змішування зубної пасту з водою утворюється безліч дрібних повітряних бульбашок, які одночасно лопаються, внаслідок чого створюється високий тиск, який сприяє швидкому видаленню зубного нальоту без будь-якої шкоди для ясен. Насолоджуйтеся приємною чистотою вашої ротової порожнини.

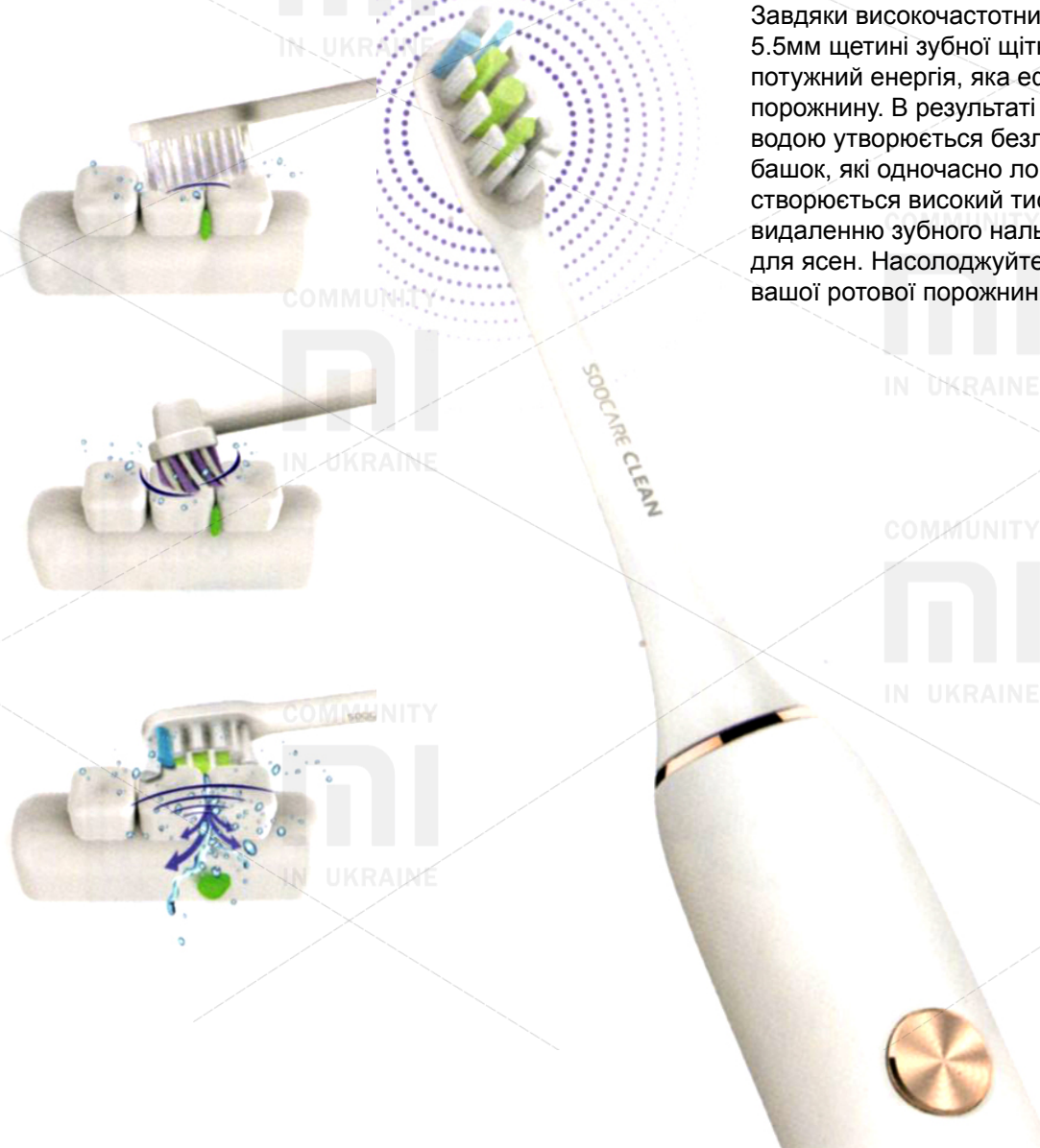

3D тривимірна конструкція щетинок


У зубній щітці Soocare x3 використовуються м'які щетини високої щільності, виробником яких є американська компанія DuPont Tynex Classic 0.152мм. На відміну від традиційного розташування щетини зубної щітки в формі маленьких гуртків, волокна щетини Soocare x3 розташовані в формі ромба, трапеції, овалу, завдяки чому щільність волокон щетини збільшилася на 40%. Це сприяє ефективному видаленню зубного каменю і зубного нальоту під час чищення зубів. Ефективність чищення зубів зубною щіткою Soocare x3 досягає 100% без будь-якої шкоди для ясен.

* Стоматологи рекомендують міняти головку зубної щітки раз в три місяці.



Універсальна чистка зубів Soocare Clean

Використання м'яких нейлонових волокон високої щільності від американської компанії DuPont Tynex Classic 0.152мм. Дугоподібне розміщення волокон щетини ідеально повторює форму розташування зубів. Підходить для щоденного користування для більшості людей.

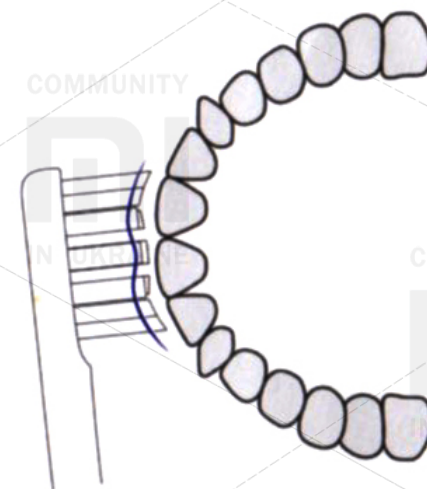

Відскануйте QR-код, отримаєте продовжену гарантію!



Спільнота Soocare x3

Завантажте Soocare APP, отримуйте монети і обмінюйте їх на призи!



Soocare APP

SOOCARE

Чутливий догляд за зубами Soocare Inter

Використання м'яких нейлонових волокон високої щільності від американської компанії DuPont Tynex Classic 0.152мм. Ступінчаста конструкція щетинок головки зубної щітки дозволяє легше проникнути у важкодоступні місця ротової порожнини, сприяє видаленню всіх залишків їжі в міжзубних проміжках. Підходить для чутливих ясен і для боротьби з карієсом.



Глибока чистка зубів Soocare Mini

Використання м'яких нейлонових волокон високої щільності від американської компанії DuPont Tynex Classic 0.152мм. Маленька конструкція головки зубної щітки сприяє зручному, легкому та ретельному чищенні зубів. Підходить для курців, людей, що п'ють каву, а також для тих, хто має інші серйозні проблеми з зубами.



Чотири режиму чищення зубів Високоєфективна чистка зубів



Режим стандартної очистки

У даному режимі здійснюється близько 31000 високо-частотних вібрацій на хвилину, що сприяє ефективній очищенню порожнини рота, видалення зубного нальоту та інших сторонніх часток. Використовується для щоденної ефективної чистки зубів



Чутливий режим

Гарантія ефективної чистки ротової порожнини, надання особливої уваги ясен. Призначений для користувачів, які часто стикаються з проблемою запалення ясен, мають зубні імпланти або носять брекети.



Догляд за яснами / режим новачка

Ефект масажу, максимальне приділення уваги яснам, більш приємні відчуття під час чищення зубів. Призначений для користувачів, які мають проблему кровоточивості ясен, віддалені зуби або страждають від виразкового стоматиту. При першому використанні зубної щітки Soocare x3 рекомендується включати даний режим та користуватися ним протягом тижня, щоб поступово перейти від використання звичайної зубної щітки до електричної щітки Soocare x3.




Вибілювання / індивідуальний режим

У даному режимі здійснюється від 348000-372000 високочастотних вібрацій на хвилину. Використання режиму при необхідності глибокого чищення ротової порожнини. Даний режим призначений для усунення частинок і нальоту після куріння, вживання чаю, кави і т.д. Скористайтеся додатком, щоб встановити «індивідуальні налаштування» для більш якісного та приємного процесу чищення зубів.

Визначення чистоти ротової порожнини

У зубній щітці Soocare x3 є вбудований високоточний сенсор ST G-Sensor і Nordic Bluetooth 4.0 чіп. Підключіть зубну щітку до смартфона через app, після кожного чищення зубів отримуйте і переглядайте дані про чистоту вашої ротової порожнини.

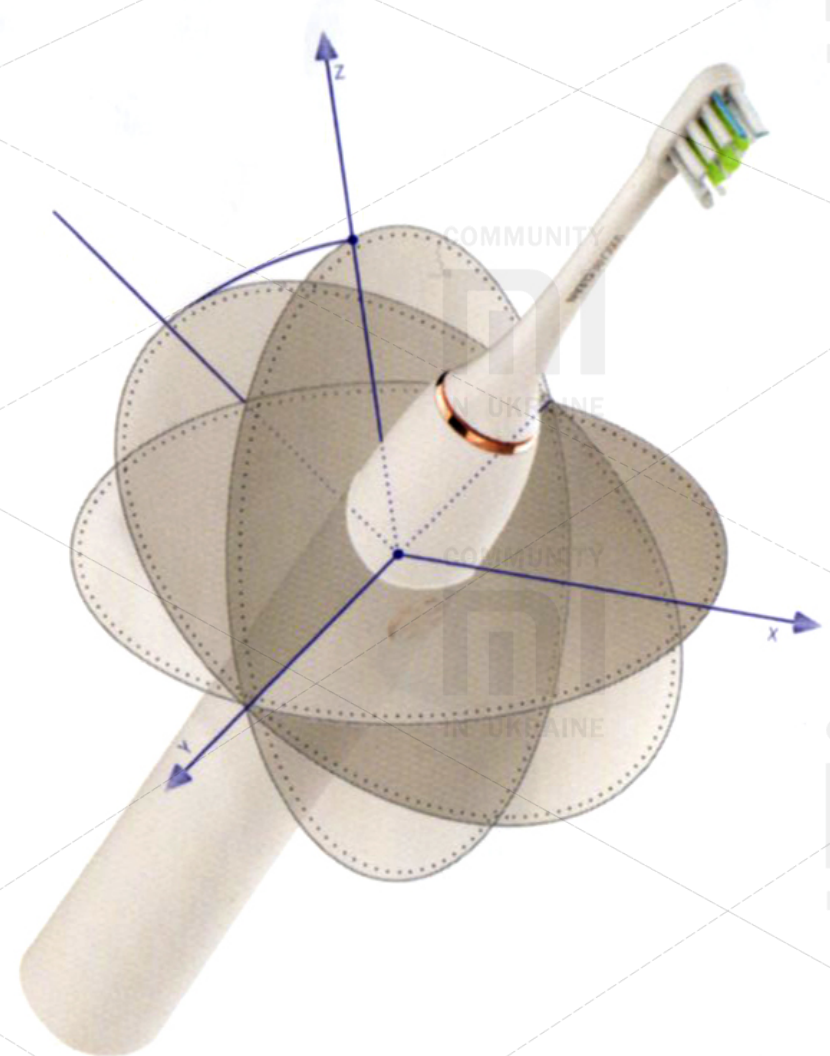

Soocare x3 APP

Завантажте Soocare x3 APP, накопичуйте бали та обмінюйте їх на певний товар.

Установка APP

У APP Store знайдіть додаток «Soocare» або відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток.



Головна сторінка

- Монети
- Синхронізація даних
- Бали за поточний день
- Список товарів, які можна поміняти за монети
- Аналіз стану зубів за поточний день
- Вартість товару (в монетах)
- Рівень заряду зубної щітки & Час заміни головки зубної щітки



Товар, який можна поміняти за монети

Mi Smart Home

Цей пристрій вже входить у перелік пристроїв Mi Smart Home, підтримує систему MIUI, а також може сполучатися з іншими розумними пристроями у вашому домі.

1. Установка APP

У APP Store знайдіть додаток «Mi Smart Home» або відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток.

2. Додавання нового пристрою

Відкрийте основну сторінку додатку, в «моїх пристроях» у правому верхньому кутку додайте «Soocare». Після успішного додавання, знайдіть даний пристрій у списку «Mi Smart Home».



Щоб придбати інші Smart пристрою або дізнатися більше інформації щодо управління даного пристрою, будь ласка, зареєструйтесь у Mi «Smart Home» APP.