



Электрическая зубная щетка OcClean Smart Electronic Toothbrush

xiaomi-mi.com

Руководство пользователя

Спасибо за использование электрической зубной щетки Oclean One Smart Sonic Electric Toothbrush.

Важная информация о технике безопасности

- Из-за высокоскоростных вибраций, во время первого пользования зубной щеткой, Вы можете чувствовать покалывание. Это ощущение постепенно исчезнет во время регулярного пользования щеткой.
- Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, аккумулятор разрядится из-за энергопотребления во время режима ожидания. Это может быть решено зарядкой. Индикатор зарядки на щетке загорается не сразу. Подождите 6 - 10 минут пока зубная щетка вернется к своему нормальному состоянию.
- Зубная щетка может нагреваться в процессе подзарядки. Если зубная щетка нагревается до очень высоких температур, немедленно прекратите зарядку и/или выключите щетку, и отнесите ее в авторизованный сервисный центр Oclean для диагностики.
- Для зубной щетки можно использовать только специальные насадки Oclean.
- Зубная щетка предназначена только для чистки ротовой полости. Не используйте ее для других целей.
- Зубная щетка является личным предметом. Этот продукт не предназначено для использования в стоматологических клиниках и он не должен использоваться для многих пациентов.
- Зубная щетка не должна находиться под прямыми лучами солнца в течение длительного времени. Она должно храниться в прохладном и сухом месте.

Лицам с повышенной чувствительностью ротовой полости

Следующим категориям лиц необходимо пользоваться данным продуктом с осторожностью.

1. Лицам, которым проводились хирургические вмешательства на пародонте, или которые на данный момент проходят лечение.
2. Лицам, имеющим заболевания полости рта, искусственные зубы, которые плохо держатся, или кровоточащие десны.
3. Лицам с повышенной чувствительностью ротовой полости перед использованием данного продукта необходимо проконсультироваться со стоматологом.

Зубная щетка не подходит для людей с ограниченными умственными и физическими возможностями. Не подходит для младенцев и детей до 12 лет. Детям разрешается использовать данный продукт только под наблюдением взрослых.

Регулярно очищайте разъем питания во избежание накопления пыли и грязи, что может снизить эффективность подзарядки.



Режим пробуждения (изначально)

- Сделайте короткое нажатие на кнопку питания для того чтобы включить зубную щетку, прозвучит звуковое приветствие. Щетка автоматически перейдет в режим сна после 15 секунд без использования.
- Короткое нажатие после включения зубной щетки активирует выполнения указанного режима чистки.
- Согласно плану чистки, зубная щетка автоматически остановится после указанного времени. Если Вам необходимо прекратить чистку перед достижением указанного времени, сделайте короткое нажатие на кнопку питания для остановки чистки.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для изменения интенсивности чистки.

Режим чистки без этапа пробуждения (активируется через мобильное приложение)

- Режим чистки без этапа пробуждения может быть активирован через мобильное приложение. Короткое нажатие на кнопку питания пропустит режим пробуждения и сразу запустит процесс чистки.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для изменения интенсивности чистки.

Режим анти-разбрызгивания (активируется через мобильное приложение)

- Включите анти-разбрызгивание через мобильное приложение Oclean, оно эффективно предотвращает разбрызгивание жидкости когда зубная щетка не используется в прямом контакте с зубами.

• Короткое нажатие
Включение / выключение

• Долгое нажатие
Изменить интенсивность



Индикатор питания

Чувствительный

Мягкий

Стандартный

Сильный

4 режима очистки

L1 (·) горит 1 индикатор Чувствительный

L2 (·) горит 2 индикатора Мягкий

L3 (·) горит 3 индикатора Стандартный

L4 (· ·) горит 4 индикатора Сильный

L1 Чувствительный

Подходит для людей с чувствительными зубами, использующих электрическую зубную щетку первый раз.

L2 Мягкий

Подходит для лиц, использующих электрическую зубную щетку первый раз.

L3 Стандартный

Подходит для лиц, которые пользовались электрической зубной щеткой ранее.

L4 Сильный

Подходит для лиц с повышенными требованиями к чистке зубов.


Разумное решение для чистки зубов

Благодаря опыту многочисленных экспериментов и советам стоматологов, Oclean One является инновационным продуктом в данной индустрии. Наш новый бренд разумных и ультразвуковых зубных щеток соответствует потребностям каждого отдельного индивида. Загрузите и войдите в аккаунт в нашем мобильном приложении для дополнительной информации.

Рекомендуемый метод чистки зубов

• Продолжительность чистки зубов


Стоматологи рекомендуют продолжительность каждой чистки зубов от 2 до 3 минут.

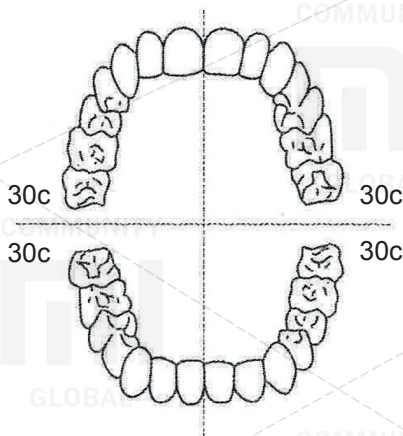

Внешняя сторона 10с
Верхняя сторона 10с
Внутренняя сторона 10с



• Рекомендуемый метод чистки зубов

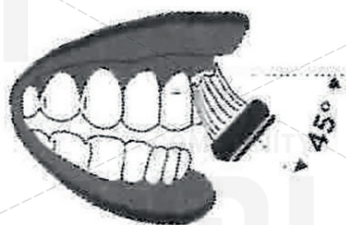

1



2



3



4



5




6


Этапи



Осторожно вставьте насадку щетки в корпус зубной щетки. Между корпусом и насадкой должен остаться небольшой промежуток для нормальной работы насадки.

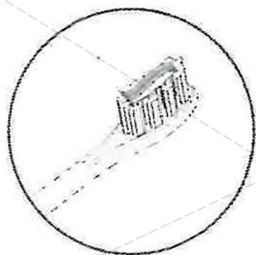

Для предотвращения разбрызгивания зубной пасты, нанесите небольшое количество пасты перед на головку щетки перед использованием. (Ультразвуковая зубная щетка экономит больше зубной пасты чем обычная зубная щетка)

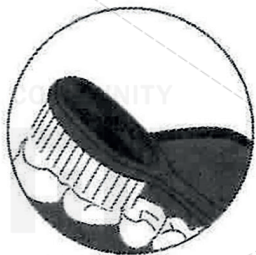


Смочите головку щетки водой и поместите ее в ротовой полости, включите щетку для того чтобы начать чистку.



Медленно двигайте щетину под углом 45° вдоль линии десен для надлежащей очистки зубов.



Держите ручку щетки и медленно двигайте ее круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно.

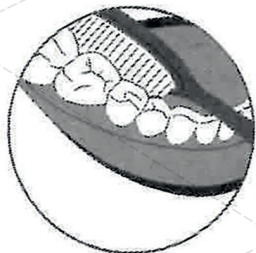

Сполосните щетку водой после завершения чистки.

Спецификация

Название	Электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Тип	Oclean One
Сила магнитного поля	280гс · см
Мощность	1,8Вт
Зарядное устройство	Док-станция Oclean USB Cradle
Продолжительность работы	60 дней (*)
Емкость аккумулятора	2600 мА · ч (**)
Продолжительность полной зарядки:	3,5 ч (***)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 и выше

* Проверено в условиях чистки в течение 2 минут, два раза в день.

** Теоретически, аккумулятор имеет диапазон емкости от 2250 мА · ч до 2950 мА · ч.

*** Рекомендуется использовать зарядное устройство USB с параметрами 5В/1А или 5В/2А.

Магнитная подзарядка

Когда Oclean One находится в контакте со специальной зарядной док-станцией, нижняя часть зубной щетки светится, показывая что зубная щетка заряжается. В случае неправильной подзарядки (короткого замыкания или перегрузки) засветится предупреждающий LED индикатор.

Процесс подзарядки

0% -95%, индикатор питания медленно мигает.

95% -100%, индикатор питания светится постоянно.

Процесс использования

Если заряд аккумулятора зубной щетки ниже 5%, индикатор питания будет мигать красным цветом, напоминая о необходимости зарядить щетку.

* Примечания

1. Замена батареи не может быть выполнена пользователем самостоятельно, и должна производиться работниками авторизованного сервисного центра Oclean. Неавторизованным организациям запрещено выполнять разборку данного продукта.
2. Кабель USB не может быть заменен неавторизованной организацией. В случае повреждения, обратитесь в Центр гарантийного обслуживания Oclean для ремонта.




Очистка и уход




Очистка насадки зубной щетки

После использования очистите насадку зубной щетки и дайте ей высохнуть. Не тяните за насадку зубной щетки, это может привести к деформации зубной щетки.

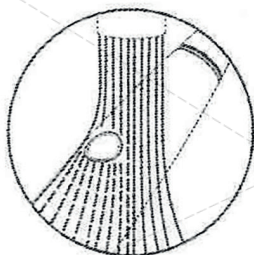


Очистка корпуса

Используйте чистую воду для того чтобы промыть поверхность ручки, протрите ее мягкой тряпкой и дайте ей высохнуть. Не нажимайте на резиновые уплотнения острыми или металлическими предметами, это может привести к их повреждению.

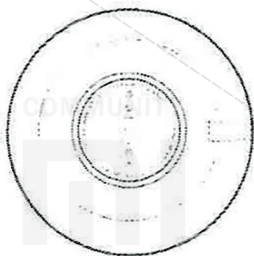

Очистка зарядного устройства

Вытрите загрязненные части зарядного устройства мягкой тряпкой. Вытяните штекер аккумулятора из гнезда перед очисткой зарядного устройства. Вытрите поверхность зарядного устройства влажной тряпкой.

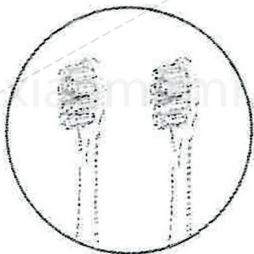

Замените насадку зубной щетки

Стоматологи рекомендуют выполнять замену насадки зубной щетки каждые 2-3 месяца для поддержания оптимального уровня очистки.

Типичные проблемы и решения

Снизу представлен список типичных проблем, возникающих у пользователей в процессе использования щетки. Эти проблемы могут быть с легкостью решены пользователями с помощью указанных методов. Выполните шаги для решения перед тем, как обратиться к профессиональному центру гарантийного обслуживания.

1. Сила вибрации стала слабой

Возможные проблемы

- Щетка слишком сильно прижата к зубам.
- Промежуток между насадкой щетки и корпусом велик или слишком мал.

Решение

- Расположите головку зубной щетки на зубах без прижима.
- Снимите насадку зубной щетки, вставьте ее на место, оставив достаточный промежуток между насадкой и корпусом.

2. Зубная щетка работает короткий промежуток времени

Возможные проблемы

- Док-станция не контактирует с кольцом для подзарядки на корпусе, возможно привело к неправильному зарядания, также будет показано с помощью LED индикатора.
- Недостаточный заряд аккумулятора.

Решение

- Очистите док-станцию.
Заряжайте устройство в течение более длительного времени.
- Прошел срок эксплуатации аккумулятора.
Если индикатор снизу зубной щетки светится красным цветом, обратитесь к авторизованному Oslean сервис-центру для замены зарядного устройства.

3. Зубная щетка не работает

Возможные проблемы

- Зубная щетка расположена на док-станции не в вертикальном положении.

Решение

- Зарядите зубную щетку.
 - Замените аккумулятор в авторизованном центре клиентской поддержки Oclean.
-

4. Звук стал тише

Возможные проблемы

- В громкоговорителе находится вода, что привело к снижению громкости.

Решение

- Расположите зубную щетку в вертикальном положении, чтобы вода вытекла естественным путем.
 - Немного встряхните щетку чтобы удалить воду.
-

* За более подробными консультациями обращайтесь по электронному адресу service@oclean.com

Название компонента	Токсичные и вредные вещества и элементы						Охрана окружающей среды
	Свинец Pb	Ртуть Hg	Кадмий Cd	Шестивалентный хром Cr6+	Полибромдифенил PBB	Полибромистый дифенилэфир PBDE	
Блок печатных плат	X	O	O	O	O	O	Срок 10 лет
Пластиковые элементы	X	O	O	O	O	O	
Металлические изделия	X	O	O	O	O	O	
Гибкая печатная плата	X	O	O	O	O	O	

Название компонента	Токсичные и вредные вещества и элементы						Охрана окружающей среды
	Свинец Pb	Ртуть Hg	Кадмий Cd	Шестивалентный хром Cr6+	Полибромдифенил PBB	Полибромистый дифенилэфир PBDE	
Вибромотор	X	O	O	O	O	O	Срок 10 лет
Электроакустический устройство	X	O	O	O	O	O	
Аксессуары	X	O	O	O	X	O	
Аккумулятор	X	O	X	O	O	O	Срок 5 лет

Примечание

O: содержание токсичного и вредного материала во всех однородных материалах компонента находится в пределах требований GB / T26572-2011;

X: содержание токсичного и вредного материала хотя бы в одном из однородных материалов компонента превышает пределы требований GB / T26572-2011;

Кроме нескольких материалов чьи заменители не могут быть найдены через уровень технического развития, основные материалы данного продукта являются экологически безопасными. Вы можете пользоваться данным продуктом без заботы о нарушении правил защиты окружающей среды.



Гарантийное свидетельство электрической зубной щетки Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

Информация о пользователе

Имя: _____ Тел.: _____ E-mail: _____

Адрес: _____ Почтовый индекс _____

Информация о продукте

Тип: _____

Место производства: _____

Информация о продаже

Название организации-продавца: _____ Тел.: _____

Адрес: _____ Почтовый индекс: _____

Номер товарного чека: _____ Дата продажи: _____

SN

Гарантийный талон

Дата доставки	Описание / причина / устранение неисправности	Оборудование, что изменялось	Дата принятия	Специалист по техническому обслуживанию

Пожалуйста, попросите отчет по техническому обслуживанию в центре технического обслуживания и храните его должным образом вместе с гарантийным сертификатом. Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. предоставляет покупателям, которые приобрели электрическую зубную щетку Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush, гарантийные услуги согласно Правил по ремонту, замене и возврату бытовой техники. В случае несоответствия между пунктами сервиса и гарантийными обязательствами, гарантийные обязательства и содержание гарантийного сертификата будут иметь приоритетное значение.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Floor 28 Tower C, Dachong Commercial Center, No. 9676 Road, Shenzhen, China

Почтовый индекс: 518057

Если с приобретенным продуктом возникают неисправности, обращайтесь

Email: service@oclean.com

www.oclean.com

Страница Oclean на Facebook



www.facebook.com/ocleanofficial



Подпишитесь на официальную страницу Oclean на Facebook

Загрузите мобильное приложение



www.oclean.com/download

Отсканируйте QR-код для загрузки мобильного приложения

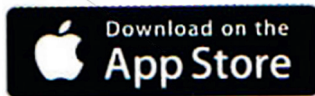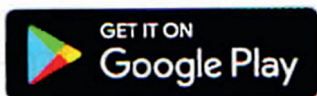

xiaomi-mi.com