

Підлогові ваги Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси


Запобіжні заходи

1. Не слід розмішувати ваги на мокрій і слизькій поверхні, також не слід ставати на ваги з мокримі ногами або ж ставати на мокру поверхню ваг, щоб уникнути ковзання.
2. При зважуванні обидві ступні повинні знаходитись по центру ваг, щоб уникнути перекидання пристрою.
3. Експлуатаційне середовище має бути сухим, забороняється опускати ваги в воду.
4. Використовуйте вологу ганчірку і нейтральний миючий засіб для протирання поверхні ваг, забороняється контакт з органічними розчинниками і іншими хімікатами.
5. Після витрачання заряду батареї, відразу ж дістаньте батарею, щоб уникнути протікання батареї і пошкодження ваг.
6. Особам з кардіостимуляторами та іншим медичним обладнанням не рекомендується використовувати даний пристрій. При аналізі складу тіла професійних спортсменів, вагітних жінок або інших осіб, які перебувають в нечисленних особливих положеннях результат може мати похибку.


Основні параметри

Розміри: 300мм X 300мм X 20 мм;
Вага-нетто: 1,6 кг;
Межа вимірювань: 5 кг - 150 кг;
Одиниці вимірювань: цинь / кг / фунт;
Крок виміру: 50 г;
Матеріал корпусу: АБС-пластик;
Бездротове з'єднання: Bluetooth 4.0;
Робоча температура: 0 ° C ~ 40 ° C;
Батарея: 4 батареї AAA;
Вимоги до обладнання: ОС Android 4.4 / iOS 8.0; і вище, з підтримкою Bluetooth 4.0.

Встановлення батареї

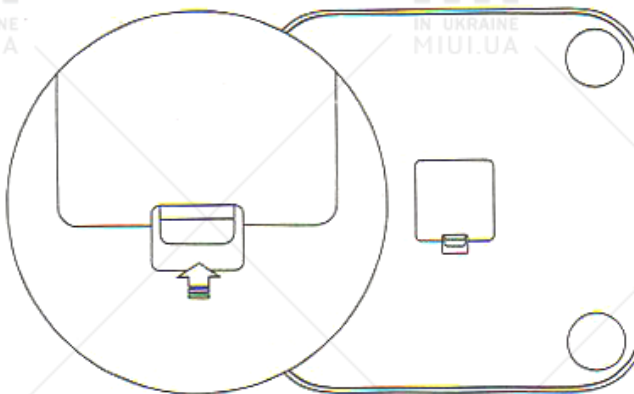

Відкрийте кришку відсіку для батареї, відповідно до напрямку, вказаного на зображенні в відсіку для батареї, вставте 4 батареї, що йдуть в комплекті.

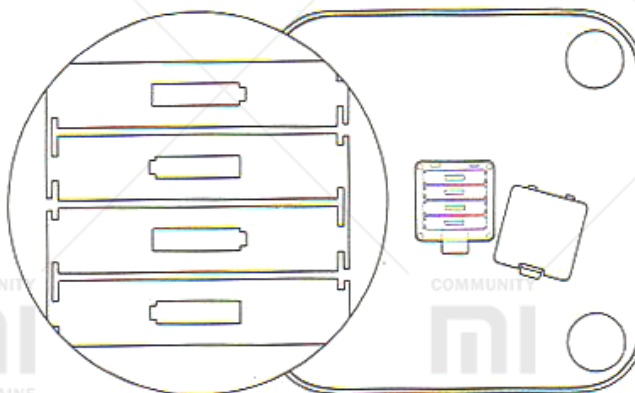

Встановлення додатку

Введіть в рядок пошуку «Mi Fit» в магазині додатків Хіаомі або App Store, або ж відскануйте QR-код нижче для скачування і установки останньої версії програми.



Додавання ваг

Відкрийте програму MiFit увійдіть в акаунт Хіаомі і додайте ваги, слідуючи підказкам, введіть персональні дані.

Після додавання ваг можна переглядати історію зважувань і інформацію про стан тіла в мобільному додатку.

Початок використання

Розмістіть ваги на твердій рівній поверхні. Босими ногами станьте на поверхню ваг як зазначено на зображенні, забезпечте хороший контакт шкіри двох ступнів з чотирма металевими електродами.

Після того як відображення показника ваги стабілізуються почнеться вимір стану тіла, коли починає блимати повна смуга прогресу внизу відображення показника ваги, це означає що вимір закінчено, після цього можна увійти в додаток MiFit для перегляду інформації про склад тіла.



Якщо при зважуванні блимає значок «OL», це означає що перевищено максимальну межу вимірювань ваги 150 кг.



надається право на безкоштовний обмін або ремонт товару.

3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення несправності, зазначеної в «Списку характерних несправностей підлогових ваг Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси», що було підтверджено центром післяпродажного обслуговування Хіаомі, Вам надається право на безкоштовний ремонт.

Список характерних несправностей

Відмова в роботі функцій, зазначених в керівництві. Неможливо включити пристрій, неможливо виміряти вагу, жирову масу. На дисплеї відсутня зображення / присутні помилки / биті пікселі. Неможливо здійснити синхронізацію з зазначеними пристроями. Тріщина корпусу, що виникла через структури або використаних матеріалів.

Наступні умови не підпадають під гарантійні зобов'язання:

1. Питання до якості, що виникли в результаті неуповноваженого ремонту, неправильного використання, попадання всередину рідини, нещасного випадку, модифікації, неправильного використання комплектуючих не призначених для цього пристрою або установки системи програмного забезпечення; розрив, виправлення етикетки або серійного номера пристрою.
2. Закінчення строку гарантії.
3. Пошкодження, що виникли в результаті форс-мажорних обставин.
4. Не відповідають несправностям, зазначеним у «Списку характерних несправностей підлогових ваг Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси».

Гарантійні зобов'язання

Центр післяпродажного обслуговування підлогових ваг Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси зобов'язується: здійснювати гарантійне післяпродажне обслуговування відповідно до Закону КНР «Про захист прав споживачів» та Закону КНР «Про якість продукції», гарантійне сервісне обслуговування має на увазі: Протягом терміну дії гарантії у Вас є право на ремонт, обмін або повернення товару, згідно з даними положеннями. Ремонт, обмін і повернення товару виконуються при наявності товарного чека.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення несправності, зазначеної в «Списку характерних несправностей підлогових ваг Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси», що було підтверджено центром сервісного обслуговування Хіаомі, Вам надається право на безкоштовний повернення, обмін або ремонт товару .

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення несправності, зазначеної «Списку характерних несправностей підлогових ваг Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси », що було підтверджено центром післяпродажного обслуговування Хіаомі, Вам

Установка одиниць виміру маси

При випуску з заводу на вагах Хіаомі з функцією вимірювання жирової маси встановлена одиниця виміру «цзинь», будь ласка, відкрийте MiFit, в меню налаштувань обладнання ваг замініть одиницю виміру ваг. Ваги підтримують три одиниці виміру: «цзинь», «кілограм» і «фунт».

Літерні підказки

Якщо при зважуванні блимає значок «L», це означає низький заряд батареї, будь ласка замініть батарею.



Назва та вміст шкідливих речовин у товарі

Назва компонента	Шкідливі речовини					
	Pb	Hg	Cd	CrIV	PBB	PBDE
Корпус	O	O	O	O	O	O
Монтажна плата	X	O	O	O	O	O
Ніжки ваг	O	O	O	O	O	O

Дана таблиця була складена відповідно до положень SJ / T 11364.

O: означає що вміст даної шкідливої речовини в однорідному матеріалі даного компонента знаходиться в межах вимог положень GB / T 26572.

X: означає що вміст даної шкідливої речовини в як мінімум в одному з однорідних матеріалів даного компонента перевищує межу вимог положень GB / T 26572.

Даний товар відповідає вимогам RoHS по охороні навколишнього середовища; на даний момент не існує відпрацьованої технології, яка дозволяє замінити або знизити вміст свинцю в електротехнічній кераміці і мідних сплавах.

Під терміном екологічно безпечний термін використання, мається на увазі безпечний термін, в межах якого при нормальних умовах експлуатації, що містяться в даному товарі шкідливі речовини або елементи не становлять небезпеку.

Перед використанням товару уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його належним чином.

Підлогові ваги Xiaomi з функцією вимірювання жирової маси

Модель: XMTZC02HM;

СМІІТ ID: 2016DP6264;

Чинний стандарт: Q / HM02-201;

Виробник: ТОВ «Аньхуей Хуамі Інформейшн Технолоджіс»

Адреса: м Хефей, Зона економічного і наукового розвитку, вул. Ванцянсі 800, державна база Дунмань, корп. А4, офіс +1201;

Заходьте на інтернет-сторінку центру післяпродажного обслуговування Xiaomi: www.mi.com/service

або телефонуйте на номер сервісної підтримки Xiaomi

і дізнайтеся більше про післяпродажному обслуговуванні.